



THUASNE

MOBIDERM COMPRESSIE BH


De juiste BH-maat kiezen



Zo bepaal je de juiste BH-maat

De juiste bh-maat bepaal je het beste met een goed passende bh aan:

- De onderrand van de bh mag niet insnoeren.
- De cups mogen de borsten niet insnoeren en moeten deze volledig omsluiten aan de zijkanten en bij het decolleté

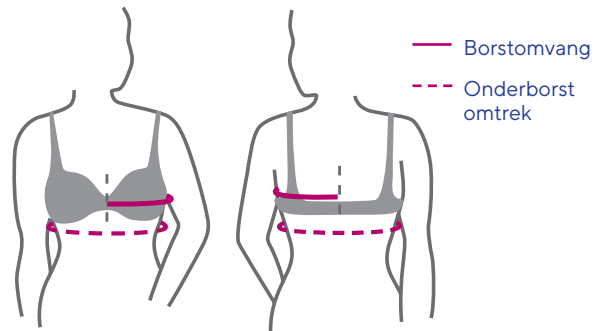

1. De juiste maat bh bepalen

Meet eerst de onderborstomtrek. Vergelijk de meting met de juiste bh-maat in onderstaande tabel (stap 1).

Voorbeeld: 79 cm gemeten = bh-maat S.

2. De juiste cupmaat vinden

Meet vanaf het midden van de rug (ruggengraat) over het volste deel van de borst tot aan het borstbeen.

Verdubbel vervolgens dit meetresultaat. Zoek deze maat op in dezelfde kolom als de bh-maat in gedeelte (stap 2) van de tabel.

Voorbeeld: 47 cm gemeten, is verdubbeld 94 cm. Als de bh-maat S is, is de cupmaat B.

Dus in dit geval bestel je een Mobiderm compressie BH, maat S, cup B. De bijbehorende Z-index code vind je hiernaast.

Z-index	Omschrijving
17129516	Mobiderm compressie BH, maat XS, cup AA/A
17129451	Mobiderm compressie BH, maat XS, cup B/C
17129508	Mobiderm compressie BH, maat XS, cup D/E
17129540	Mobiderm compressie BH, maat S, cup AA/A
17129524	Mobiderm compressie BH, maat S, cup B/C
17129532	Mobiderm compressie BH, maat S, cup D/E
17129575	Mobiderm compressie BH, maat M, cup AA/A
17129559	Mobiderm compressie BH, maat M, cup B/C
17129567	Mobiderm compressie BH, maat M, cup D/E
17129605	Mobiderm compressie BH, maat L, cup AA/A
17129583	Mobiderm compressie BH, maat L, cup B/C
17129591	Mobiderm compressie BH, maat L, cup D/E
17129648	Mobiderm compressie BH, maat XL, cup AA/A
17129613	Mobiderm compressie BH, maat XL, cup B/C
17129621	Mobiderm compressie BH, maat XL, cup D/E

Stap 1: Onderborstomtrek in cm

68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107	108-112	113-117
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	---------	---------	---------

Internationale bh-maat

XS	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL
----	----	---	---	---	---	---	---	----	----

Stap 2: De juiste cupmaat wordt afgeleid van de borstomvang in cm

AA	80-82	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127
A	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114	117-119	122-124	127-129
B	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116	119-121	124-126	129-131
C	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118	121-123	126-128	131-133
D	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120	123-125	128-130	133-135
E	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122	125-127	130-132	135-137