

KIT BIFLEX

2-laags zwachtelsysteem voor ulcus cruris



EENVOUDIG

Dankzij rekindatoren en overlap-lijnen



DUURZAAM

Wasbaar, minimaal vier keer herbruikbaar



EFFECTIEF

Kunnen dag en nacht blijven zitten

REKINDICATOREN & OVERLAP-LIJNEN VOOR GEMAKKELIJK, EN VEILIG ZWACHTELEN



Verband 1: zacht, zodat de huid en uitstekende botdelen beschermd worden.



Verband 2: tweezijdig elastisch, voor het vereiste drukniveau.




Dankzij de gepatenteerde rekindatoren & overlap-lijnen kan het verband reproduceerbaar en met een gecontroleerde druk worden aangelegd.



Verkrijgbaar in 3 maten en 1 hoogte
zodat het verband altijd past
bij de morfologie van de patiënt.

	Z-index
MAAT 1: < 25 cm	16811372
MAAT 2: 25-30 cm	16811402
MAAT 3: > 30 cm	16811429

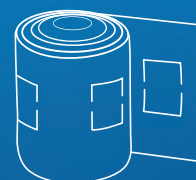



ZWACHTELEN MET MOBIDERM

Indicatie: Reductie van veneus- en lymfoedeem.

Werking: Mobiderm zorgt voor drukverschillen op de huid, wat oedeem snel en effectief reduceert.

BENODIGDHEDEN



Laag 1

FIXATIE HUIDBESCHERMING

KATOENEN KORTE-REKZWACHTEL

Rigide katoenen zwachtel

Indirect contact met de huid zorgt deze zwachtel voor een goede fixatie. Deze zachte, gevoerde katoenen zwachtel biedt bescherming voor de door lymfoedeem verzwakte huid.



Laag 2

DRAINAGE VAN HET OEDEEM

MOBIDERM

Mobilisatieverband

Door Mobiderm onder een reducerend verband te gebruiken, wordt oedemateus of verhard subcutaan weefsel gemobiliseerd. Het wordt aangebracht bovenop het eerste cutane beschermingsverband.



Laag 3

RETENTIE

BIFLEXIDEAL®

Korte-rekzwachtel

Een korte-rekzwachtel (<100% stretch) als derde laag garandeert reductie van het oedeem en doeltreffende drainage in geval van lichaamsbeweging.

In geval van ernstig lymfoedeem bij actieve patiënten, kan de rigiditeit worden versterkt met een extra laag.

Ernstig oedeem bij patiënten met verminderde mobiliteit of weinig motivatie voor de behandeling



Laag 4

COMPRESSIE


BIFLEX

Elastische zwachtel

Voor actieve compressie en voor reductie van oedeem, zelfs in geval van verminderde mobiliteit, wordt een vierde zwachtel gebruikt. Deze mag alleen overdag worden gedragen.



MOBIDERM VERBANDEN

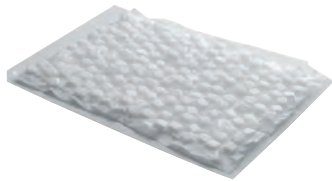


MOBIDERM pads

Afmetingen	Omschrijving	Z-index
25 cm x 1 m	Kleine blokjes (5 mm x 5 mm)	15778649
25 cm x 25 cm	Kleine blokjes (5 mm x 5 mm)	16593693
25 cm x 1 m	Grote blokjes (15 mm x 15 mm)	15778657



MOBIDERM verband

Afmetingen	Omschrijving	Z-index
10 cm x 3 m	Grote blokjes 15 mm x 15 mm	15778665

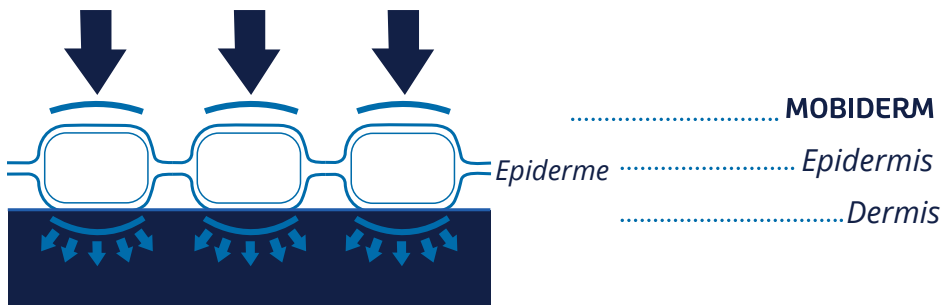

MOBIDERM IS EEN HIGHTECH MOBILISATIE COMPRESSIEHULPMIDDEL

EFFECTIEF

- Snelle reductie van het oedeemvolume.
- Verzacht de fibrotische, sclerotische of oedemateuze huid.

PRAKTISCH

- Licht, comfortabel en flexibel. Zorgt dat de patiënt zijn bewegingsvrijheid behoudt en door mobiliteit wordt het drainagevermogen vergroot.

COMFORTABEL

- Zacht
- Eenvoudig aan te brengen.



Kleine blokjes

- Doeltreffend op gebieden met een klein oppervlak, zoals vingers, handrug en voetrug.



Grote blokjes

- Doeltreffend op grote oppervlakten, zoals been, romp, arm of genitale zone.



MULTI-TYPE VERBANDEN

HUIDBESCHERMING




Katoenen korte-rekzwachtel

Niet-elastisch anti-oedeemverband

Samenstelling: 100% katoen.

Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
11 cm	4 m	Wit	15520056

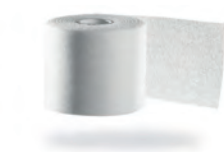

Beschermende schuimverband

Dun rekverband van foam

Bescherming van huidoppervlak.

Breedte	Lengte	Kleur	Artikelnummer
7 cm	27 m	Wit	5507091000

REDUCTIE



Biflexideal®

Korte-rek compressieverband

65% stretch en kracht van 45 cN/cm.

Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
3 cm	5 m	Wit	16135725
6 cm			15686914
8 cm			15686922
10 cm			15686930



Biplast

Adhesief compressieverband

Kleefkracht in meerdere richtingen tot de rand van het verband.



Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
3 cm	2,5 m	Wit	13624792
6 cm			13624806
8 cm			13624814
10 cm			13624822
15 cm			15502449
20 cm			15502457




ELASTISCHE COMPRESSIE

EENVOUD, DANKZIJ DRUKINDICATOREN EN OVERLAP-LIJNEN

Medium-rekzwachtel elastische zwachtel met drukindicatoren

Tweerichting elastisch gewoven zwachtel.

Nauwkeurige controle van de uitgeoefende druk dankzij de drukindicatoren (ijkttekens voor de spanning van het verband) en de overlap-lijnen.

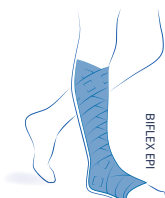

Versies:


- BIFLEX 16+ (light) - BIFLEX 17+ (strong)
- BIFLEX EPI 16+

Omschrijving	Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
BIFLEX 16+ LIGHT	8 cm	3 m	Beige	13624458
		3,5 m		15735710
		4 m		13624474
		5 m		15735729
	10 cm	3 m	Beige	15735583
		3,5 m		15735605
		4 m		15735621
		5 m		15735664
BIFLEX 17+ STRONG	8 cm	3 m	Beige	13624539
		4 m		13624555
	10 cm	3 m	Beige	13624547
		3,5 m		15735893
		4 m		13624563
		5 m		15735907
BIFLEX EPI 16+ LIGHT	8 cm	7 m	Beige	15736245



BIFLEX AANBRENGEN IN TWEE SIMPELE STAPPEN


1 REKINDICATOREN

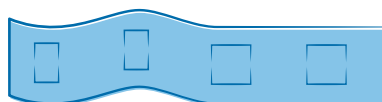

RECHTHOEK → VIERKANT


2 OVERLAP-LIJNEN

BIFLEX 16+

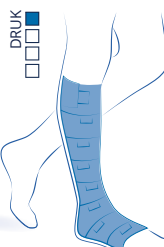


**HALF-
OVERLAPPENDE
VIERKANTEN**
(Force 1)

BIFLEX 16+

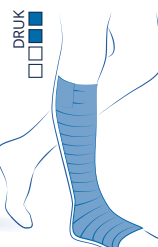

**VOLLEDIG
OVERLAPPENDE
VIERKANTEN**
(Force 2)

BIFLEX 17+

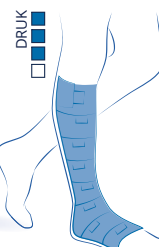

**HALF-
OVERLAPPENDE
VIERKANTEN**
(Force 1)



MULTI-TYPE ZWACHTELS

ELASTISCHE COMPRESSIEZWACHTEL

BIFLEX+ PRATIC

Gradueel medium-rekzwachtels met drukindicatoren

Met een handige lus om je bandage mee op te starten.



Omschrijving	Breedte	Lengte	Kleur	Z-index
BIFLEX 16+ PRATIC LIGHT	8 cm	3 m	Beige	13624407
		4 m		13624423
	10 cm	3 m	Beige	13624504
		4 m		13624431
BIFLEX 17+ PRATIC STRONG	10 cm	3 m	Beige	15736059
		4 m		15736067



PRATIC-VERBAND

Gebruiksvriendelijk, geeft de patiënt autonomie, kan worden aangebracht door gezinsleden, tijdwinst voor thuiszorg- en ziekenhuispersoneel.

- Schuif de voet in de verband.
- Naad boven op de voet.
- 1e slag rond de hiel.
- 2e slag vastzetten vanaf de onderkant.
- 3e slag vastzetten vanaf de bovenkant.
- Volg de overlaplijnen en rek de rechthoeken uit tot vierkanten.

BIFLEX ACCESSOIRES



KLITTENBANDSLUITING

Verpakking	Artikelnummer
4 klittenbandsluitingen	5903 091 000



POLSTERING

SCHUIMVERBAND

Geëmulgeerd latex foam

Voor het polsteren van lichaamsdelen.

De afgebogen snijrand maakt het mogelijk het schuimverband overlappend te zwachtelen.

Dankzij de open celstructuur van het foam is het verband luchtdoorlatend en beperkt het de risico's van wondmaceratie.



Dikte	Breedte	Lengte	Z-index
8 mm	8 cm	1 m	16593340
	10 cm		16593367
12 mm	10 cm	1 m	16593405


VARICO

Latex foampad

Voor polsteren van lichaamsdelen.

Dankzij de open celstructuur van het foam is de pad luchtdoorlatend en beperkt het de risico's van wondmaceratie.

Model	Afmetingen	Verpakking	Z-index
0	63 mm x 87 mm	2 stuks	16593472
1	70 mm x 132 mm	1 stuk	16593634
2	125 mm x 164 mm	1 stuk	16593642
3	200 mm x 250 mm	1 stuk	16593650
4	343 x 230 x 360 mm (trapezevorm)	1 stuk	16593669

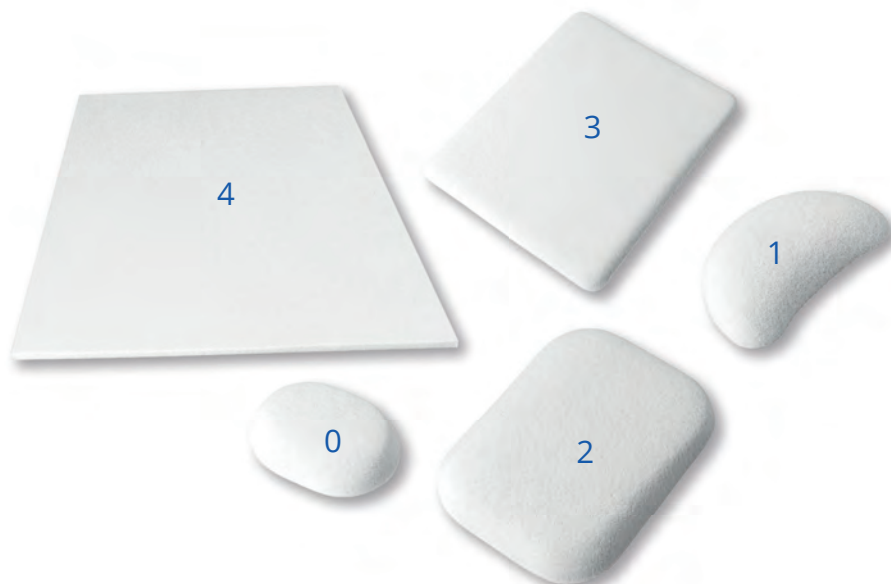

BEHANDELING VAN LYMFOEDEEM

ONDERHOUDSFASE



NORMALE MORFOLOGIE of gematigd oedeem

MOBIDERM
STANDAARD



Arm

MOBIDERM
autofit



Arm & hand



Hand zonder
vingers



Hand met
vingers



Onderbeen



Been

AFWIJKENDE MORFOLOGIE of ernstig lymfoedeem

MOBIDERM
MAATWERK



Arm



Arm & hand

MOBIDERM
autofit




Arm



Onderbeen



Been

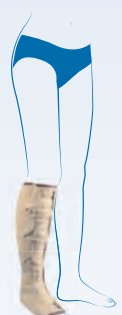

Onderbeen



Been

MOBIDERM autofit

Confectie, zelf in te stellen point pressure device (PPD)

ARM & HAND

Z-index: 16187210

Diverse instelmogelijkheden

- Aan te passen aan de morfologie van de patiënt.
- Markeringstekens: precieze en reproduceerbare compressie-instellingen. Toepasbaar bij volumevariatie van het oedeem.

Klittenbandsluiting

Gemakkelijk en snel in te stellen.

Armkuus met handschoen zonder vingers:

- Beperkt het risico van oedeemmigratie.
- De hand kan worden vrijgemaakt voor dagelijkse activiteiten.

GEPATENTEERD
HULPMIDDEL




Semi-open compressiekleding
Gemakkelijk aan en uit te trekken.



MATEN

Maat	Hand- omvang (cA)	Pols- omvang (cC)	Elleboog- omvang (cD)	Bovenarm- omvang (cG)	Artikelnummer	
					Normaal ℓ = 40 - 45 cm	Lang ℓ = 45 - 50 cm
RECHTS						
1	17 - 21 cm	15 - 19 cm	22 - 28 cm	25 - 32 cm	37330220100261	37330220100271
2	17 - 21 cm	16 - 20 cm	24 - 30 cm	29 - 36 cm	37330220200261	37330220200271
3	18 - 22 cm	17 - 21 cm	26 - 32 cm	33 - 40 cm	37330220300261	37330220300271
4	18 - 22 cm	17 - 21 cm	28 - 34 cm	37 - 44 cm	37330220400261	37330220400271
5	19 - 23 cm	18 - 22 cm	30 - 36 cm	41 - 48 cm	37330220500261	37330220500271
6	20 - 24 cm	19 - 23 cm	31 - 37 cm	45 - 52 cm	37330220600261	37330220600271
LINKS						
1	17 - 21 cm	15 - 19 cm	22 - 28 cm	25 - 32 cm	37330220100262	37330220100272
2	17 - 21 cm	16 - 20 cm	24 - 30 cm	29 - 36 cm	37330220200262	37330220200272
3	18 - 22 cm	17 - 21 cm	26 - 32 cm	33 - 40 cm	37330220300262	37330220300272
4	18 - 22 cm	17 - 21 cm	28 - 34 cm	37 - 44 cm	37330220400262	37330220400272
5	19 - 23 cm	18 - 22 cm	30 - 36 cm	41 - 48 cm	37330220500262	37330220500272
6	20 - 24 cm	19 - 23 cm	31 - 37 cm	45 - 52 cm	37330220600262	37330220600272

Universele Z-index: 16187210

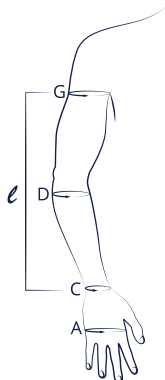

ONDERBEEN & BEEN



GEPATENTEERD HULPMIDDEL



Confectie, zelf in te stellen point pressure device (PPD)

Individueel instelbare druk

- Aan te passen aan de morfologie van de individuele patiënt.
- Markeringstekens: precieze en reproduceerbare compressie-instellingen.
- Toepasbaar bij volumevariatie van het oedeem.

Semi-open compressiehulpmiddel:

Gemakkelijk aan en uit te trekken.

Klittenbandsluiting


Gemakkelijk en snel in te stellen.

Dubbele rij sluitingen

- Ruime instelmogelijkheden.
- Geschikt voor zowel rechter- als linker-been.

Anti-slipzool

Beperkt de kans op wegglijden tijdens het lopen.

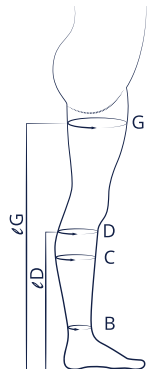

MATEN

ONDERBEEN							
Maat	Enkel- omvang (cB) <i>(op het smalste punt)</i>	Kuit- omvang (cC) <i>(op het breedste punt)</i>	Onderbeen omvang (cD) <i>(op de kop van de fibula)</i>	Z-index (rechts/links)			
				Kort ℓD = 38 - 40 cm	Normaal ℓD = 40 - 42 cm	Lang ℓD = 42 - 44 cm	Extra lang ℓD = 44 - 46 cm
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	25 - 36 cm	16516907	16517091	16517148	16517180
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	32 - 43 cm	16516974	16517105	16517156	16517199
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	39 - 50 cm	16516982	16517113	16517164	16517202
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	46 - 57 cm	16517083	16517121	16517172	16517210

BEEN							
Maat	Enkel- omvang (cB) <i>(op het smalste punt)</i>	Kuit- omvang (cC) <i>(op het breedste punt)</i>	Bovenbeen omvang (cG) <i>(op het breedste punt)</i>	Z-index (rechts/links)			
				Kort ℓG = 67 - 72 cm	Normaal ℓG = 72 - 77 cm	Lang ℓG = 77 - 82 cm	Extra Lang ℓG = 82 - 87 cm
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	46 - 57 cm	16517229	16517261	16517326	16517369
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	53 - 65 cm	16517237	16517288	16517334	16517377
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	61 - 72 cm	16517245	16517296	16517342	16517385
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	68 - 80 cm	16517253	16517318	16517350	16517393

ℓ D: hoogte van grond tot knie (meting onder de buiging van de knie, aan de achterkant).

ℓ G: hoogte van grond tot bovenbeen (meting bij de bilplooi).



MOBIDERM STANDARD

Confectie point pressure device (PPD)

Standaard producten: **snellere levering!**

BESCHRIJVING


De **MOBIDERM** standard compressiehulpmiddelen zijn ontwikkeld om oedemateus of verhard subcutaan weefsel te mobiliseren. Ze zijn bedoeld voor de behandeling van lymfoedeem in de onderhoudsfase, om de volumereductie in stand te houden. Deze producten worden dag en nacht gedragen.

Voor de arm: armkous **1**, handschoen zonder vingers **2** of handschoen **3**.

VOOR WELKE PATIËNTEN?

MOBIDERM standard compressiehulpmiddelen worden aanbevolen voor patiënten met:

- Alle stadia van lymfoedeem.
- Een normale morfologie.
- Stabiel lymfoedeemvolume.
- Daar waar therapeutische compressiekousen niet toepasbaar zijn.

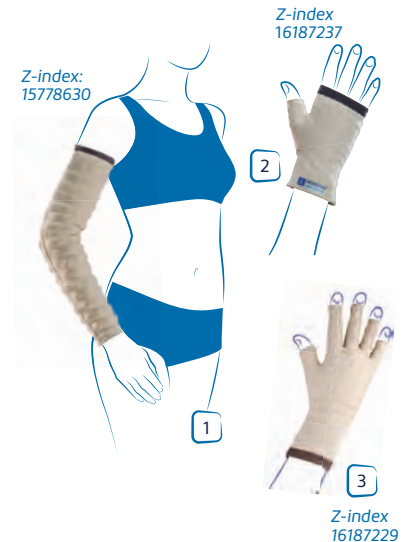

EIGENSCHAPPEN


Samenstelling:

- Buitenlaag: Polyamide, elastaan.
- Binnenlaag: Langs het been/de arm: zelfklevend non-woven, polyurethaan foam, met grote blokjes (15 x 15 mm).
- Binnenlaag: Bij de voet/hand: zelfklevend non-woven, polyurethaan foam, met kleine blokjes (5 x 5 mm).

Kleur: beige

Compressieklasse: circa 15 mmHg


MATEN

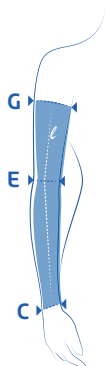

MOBIDERM STANDARD ARM (VOOR LINKS EN RECHTS) Z-INDEX 15778630					
Maat	Pols- omvang (C)	Elleboog- omvang (E)	Bovenarm- omvang (G)	Artikelnummer (rechts / links)	
				Normaal (40 - 45 cm)	Lang (45 - 50 cm)
1	14 - 16 cm	22 - 25 cm	25 - 29 cm	37300220100232	37300240100233
1+		24 - 27 cm	28 - 32 cm	37300220100232	37300240100233
2	16 - 18 cm	25 - 28 cm	29 - 33 cm	37300220200232	37300220200233
2+		27 - 30 cm	31 - 35 cm	37300240200232	37300240200233
3	18 - 20 cm	28 - 31 cm	32 - 36 cm	37300220300232	37300220300233
3+		30 - 33 cm	35 - 39 cm	37300240300232	37300240300233
4	20 - 22 cm	31 - 34 cm	35 - 39 cm	37300220400232	37300220400233
4+		33 - 36 cm	38 - 42 cm	37300240400232	37300240400233
5	22 - 24 cm	34 - 37 cm	38 - 42 cm	37300220500232	37300220500233
5+		36 - 39 cm	41 - 45 cm	37300240500232	37300240500233



MOBIDERM STANDARD HANDSCHOEN MET VINGERS Z-INDEX 16187229				
Maat	Pols- omvang (C)	Handomvang (A) (kop van middenhandsbeentjes)	Artikelnummer (rechts)	Artikelnummer (links)
1	14 - 16 cm	15 - 17 cm	37320120100201	37320120100202
2	16 - 18 cm	17 - 19 cm	37320120200201	37320120200202
3	17 - 19 cm	19 - 21 cm	37320120300201	37320120300202
4	19 - 21 cm	21 - 23 cm	37320120400201	37320120400202
5	20 - 22 cm	23 - 25 cm	37320120500201	37320120500202
6	21 - 23 cm	25 - 27 cm	37320120600201	37320120600202

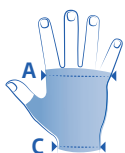

MOBIDERM STANDARD HANDSCHOEN ZONDER VINGERS (VOOR LINKS EN RECHTS) Z-INDEX 16187237			
Maat	Pols- omvang (C)	Handomvang (A) (kop van middenhandsbeentjes)	Artikelnummer (rechts / links)
1	14 - 16 cm	15 - 17 cm	37310120100299
2	16 - 18 cm	17 - 19 cm	37310120200299
3	17 - 19 cm	19 - 21 cm	37310120300299
4	19 - 21 cm	21 - 23 cm	37310120400299
5	20 - 22 cm	23 - 25 cm	37310120500299
6	21 - 23 cm	25 - 27 cm	37310120600299


LYMPHATREX VEST

LYMPHATREX vesten zijn bedoeld voor de onderhoudsfase van oedeem

Werking

Lymphatrex is een weefsel met korte-rek eigenschappen. Het is technisch geweven en heeft daardoor een hoge werkdruk en lage rustdruk. Ideaal voor compressievesten.

Stimulatie van het lymfevocht en optimalisatie van de drainage bij beweging.

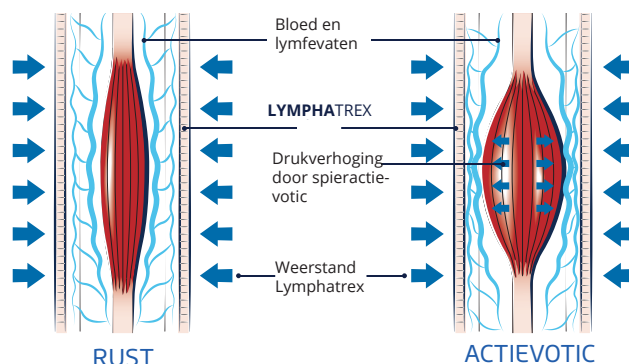

Materialen

Poly: 82% polyamide, 18% elastaan.

Dit materiaal zorgt voor een optimale vocht- en temperatuursregulatie.



Kleur: beige & zwart.

Fine: 49% polyamide, 33% tergal, 18% elastaan.

Dit materiaal voelt ultrazacht aan op de huid.

Kleur: beige, caramel & zwart.

Modellen

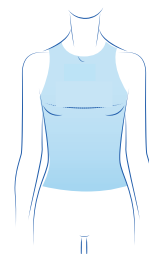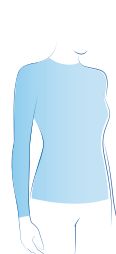

Beige of caramel
Zwart

Vest met armen
15647749
15647838

Vest zonder armen
15647730
15647811

Opties

Sluiting

Rits

Haken & ogen

Rits met haken & ogen

Siliconenband 3 of 5 cm zwart

Siliconenband 3 of 5 cm beige/caramel

Cup zwart

Cup beige

Prothesehoes

15648362

15648346

15648230

15648214

15648257

Vul het maatformulier in om een Lymphatrex vest te bestellen. Zijn de maatformulieren op? Laat het ons weten, of kijk op thuasne.nl onder downloads.

Wist je dat Thuasne trainingen verzorgt voor het aanmeten van compressiekleding?


LITTEKENS & BRANDWONDEN

CICATREX wordt toegepast in confectie en maatwerk

CICATREX SKIN

Cicatrex Skin is een zeer fijn, licht geweven, glad en zacht materiaal voor een hoog draagcomfort:


- Zacht op de huid
- Droogt snel
- Makkelijk aan te trekken

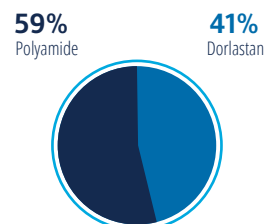

CICATREX NATURE


Cicatrex Nature bevat een hoge concentratie viscose, gemaakt van natuurlijke materialen (hout).

- Zacht op de huid
- Vocht doorlaatbaar
- Ademend
- Makkelijk aan te trekken

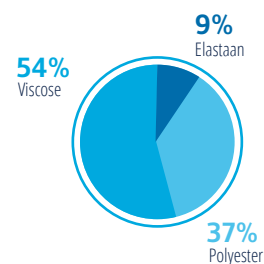


CICATREX RIGID

Cicatrex Rigid is een duurzaam en slijtvast materiaal. Ideaal voor kinderen en de actieve patiënt.

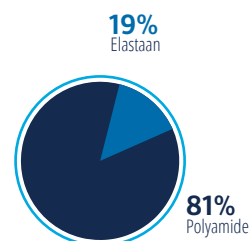

CICATREX SILVER

Cicatrex Silver is een vlakgebreid materiaal met zilvervezels. Deze zilvervezels hebben een antibacteriële werking.

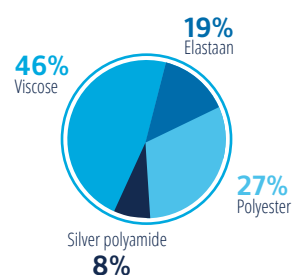


CICATREX CONFECTIE

Compressiekleding

MAATTABEL ONDERSTE EXTREMITÉIT

De meetlijn voor de bekkenomvang (A) moet op 3 of 4 cm boven de pubis rand en ter hoogte van de bovenkant van de bil.

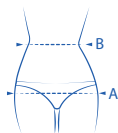

Mt	Bekkenomvang (A)	Taille omvang (B)
1	88 - 94 cm	62 - 72 cm
2	95 - 101 cm	67 - 79 cm
3	102 - 108 cm	73 - 85 cm
4	109 - 115 cm	80 - 93 cm
5	116 - 122 cm	90 - 104 cm
6	123 - 129 cm	97 - 113 cm

NATURE GORDEL

Maat	Kleur	Z-index
1		15638278
2		15638286
3		15638294
4		15638308
5		15638316
6		15638324

NATURE GORDEL HOOG

Maat	Kleur	Z-index
1		15639029
2		15639037
3		15639045
4		15639053
5		15639061
6		15639088

NATURE BERMUDA

Maat	Kleur	Z-index (wit)	Z-index (zwrt)
1		15637387	15637328
2		15637395	15637336
3		15637409	15637344
4		15637417	15637352
5		15637425	15637360
6		15637433	15637379

NATURE CAPRI

Maat	Kleur	Z-index (wit)	Z-index (zwrt)
1		15637247	15637328
2		15637255	15637336
3		15637263	15637344
4		15637271	15637352
5		15637298	15637360
6		15637301	15637379

NATURE LEGGING

Maat	Kleur	Z-index (wit)	Z-index (zwrt)
1		15637514	15637573
2		15637522	15637581
3		15637530	15637603
4		15637549	15637611
5		15637557	15737638
6		15637565	15737646

NATURE HOOFDVERBAND

Maat	Hoofdomvang (A)	Kleur	Z-index
0	51 - 52 cm		15636933
1	53 - 55 cm		15636941
2	56 - 57 cm		15636968
3	58 - 59 cm		15636976

NATURE PARTIEEL HOOFDVERBAND

Maat	Hoofdomvang (B)	Kleur	Z-index
1	27 - 30 cm		15636860
2	31 - 36 cm		15636879
3	37 - 45 cm		15636887

NATURE OPEN HOOFDVERBAND


Maat	Hoofdomvang (A)	Kleur	Z-index
0	51 - 52 cm		15636895
1	53 - 55 cm		15636909
2	56 - 57 cm		15636917
3	58 - 59 cm		15636925

NATURE OORVERBAND

Maat	Hoofdomvang (A)	Kleur	Z-index
1	< 52 cm		15637220
2	> 52 cm		15637239


CICATREX CONFECTIE

Compressiekleding

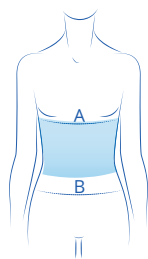


NATURE BUIKVERBAND

Maat	Omvang thorax (A)	Kleur	Z-index
1	70 - 92 cm	 WIT	15637832
2	93 - 114 cm		15637840

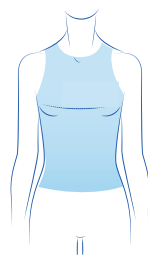


NATURE VEST ZONDER MOUWEN

Maat	Omvang thorax (A)	Kleur	Z-index
1	74 - 82 cm	 WIT	15639096
2	83 - 91 cm		15639118
3	92 - 98 cm		15639126
4	99 - 115 cm		15639134
5	116 - 120 cm		15639142
6	121 - 135 cm		15639150

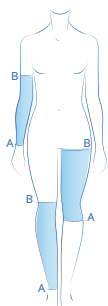


NATURE SLEEVE

Maat	Distale omvang (A)	Proximale omvang (B)	Hoogte (AB)	Kleur	Z-index
1	9 - 11 cm	19 - 23 cm	35 cm	 WIT	15637859
2	11 - 14 cm	23 - 28 cm			15637867
3	14 - 16 cm	28 - 32 cm			45 cm
4	16 - 20 cm	32 - 37 cm	15637883		
5	20 - 25 cm	37 - 42 cm	15637891		
6	25 - 30 cm	42 - 48 cm	15637905		
7	30 - 40 cm	48 - 58 cm	15637913		
8	40 - 50 cm	58 - 67 cm	15637921		

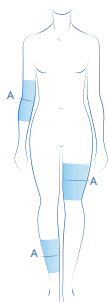

NATURE SHORT SLEEVE

Maat	Omvang midden van ledemaat (A)	Hoogte	Kleur	Z-index
1	12 - 14 cm	20 cm	 WIT	15637948
2	15 - 17 cm			15637956
3	18 - 22 cm	26 cm		15637964
4	23 - 29 cm			15637972
5	30 - 37 cm			15637980
6	38 - 45 cm			15637999
7	46 - 54 cm			15638006
8	55 - 63 cm			15638014

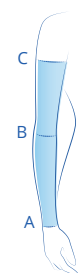

SKIN LONG SLEEVE


Maat	Distale omvang (A)	Omvang midden van ledemaat (B)	Proximale omvang (C)	Hoogte (AC)	Kleur	Z-index
1	13 - 15 cm	20 - 25 cm	22 - 28 cm	39 cm	 CAMEL	15639525
2	15 - 17 cm	23 - 28 cm	25 - 31 cm			15639533
3	17 - 19 cm	26 - 31 cm	29 - 35 cm			15639541
4	19 - 21 cm	29 - 34 cm	33 - 39 cm			15639568
5	21 - 23 cm	32 - 37 cm	37 - 43 cm			15639576
6	23 - 26 cm	35 - 41 cm	41 - 48 cm			15639584



SKIN TEENKAP

Maat	Omvang (A)	Kleur	Z-index (zw)	Z-index (cm)
1	21 - 22 cm	 ZWART	16307534	16307526
2	23 - 24 cm		16307550	16307607
3	25 - 26 cm		16307577	16307569
4	27 - 28 cm		16307593	16307585

SKIN MAATTABEL

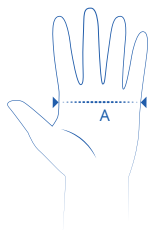

Maat	Omvang hand (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm



SKIN HANDSCHOEN LANG GESLOTEN VINGERS

Maat	Kleur	Z-index (cml)	Z-index (zwt)
1		15639673	15957411
2		15639681	15957438
3		15639703	15957446
4	CARAMEL	15369711	15957454
5		15639738	15957462
6	ZWART	15639746	15957470
7		15639754	15957489
8		15639762	15957497


SKIN HANDSCHOEN KORT GESL. VINGERS

Maat	Kleur	Z-index (cml)	Z-index (zwt)
1		15639592	15957578
2		15639606	15957586
3		15639614	15957594
4	CARAMEL	15639622	15957608
5		15639630	15957616
6	ZWART	15639649	15957624
7		15639657	15957632
8		15639665	15957640

SKIN HANDSCHOEN KORT OPEN VINGERS

Maat	Kleur	Z-index (cml)	Z-index (zwt)
1		15639770	15639851
2		15639789	15639878
3		15639797	15639886
4	CARAMEL	15639800	15639894
5		15639819	15639908
6	ZWART	15639827	15639916
7		15639835	15639924
8		15639843	15639932

FILIFINE MAATTABEL

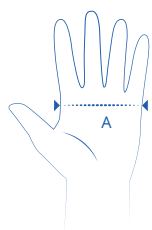

Maat	Omvang hand (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	16,5 - 18 cm
4	18,5 - 20 cm
5	20,5 - 22 cm
6	22,5 - 24 cm



FILIFINE HANDSCHOEN OPEN VINGERS KORT

Maat	Kleur	Z-index (wit)	Z-index (beige)
1		15639371	15639460
2		15639398	15639479
3		15639401	15639487
4		15639428	15639495
5		15639436	15639509
6	BEIGE	15639444	15639517

VINGERSPREIDER



Maat	Hoogte (A)	Kleur	Z-index
1	< 9 cm		15639320
2	> 9 cm	WIT	15639339




VINGER PROTECTOR

Maat	Omvang vinger (A)	Hoogte	Kleur	Z-index
1	25 - 27 mm	100 - 110 mm		16579658
2	29 - 31 mm		CARAMEL	16579666


CICATREX BROEK

Veel toegepast bij lip-/lymfoedeem

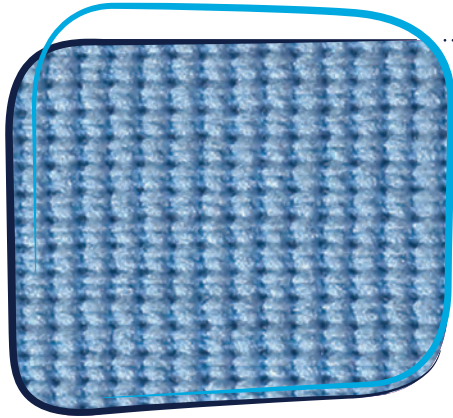

CICATREX RIGID


Cicatrex Rigid is een duurzaam en slijtvast materiaal. Ideaal voor de actieve patiënt.

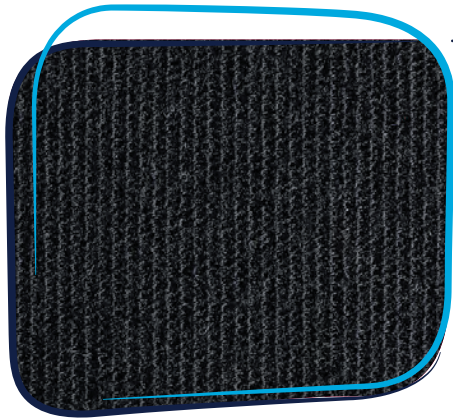

CICATREX SKIN

Cicatrex Skin is een zeer fijn, licht geweven, glad en zacht materiaal. Gegarandeerd voor een hoog draagcomfort:

- Zacht op de huid
- Droogt snel
- Makkelijk aan te trekken

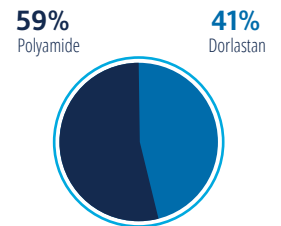

Modellen

Uitvoering
Z-Index



Panty
(AT)

15742482
15742539 (2x)
15742598 (2x)



Legging
(CT/BT)

15742482
15742539 (2x)




Bermuda
(FT/ET)

15742482
15742520 (2x)



Gecombineerd
(FT/ET)

15742482
15742520
15742539
15742598

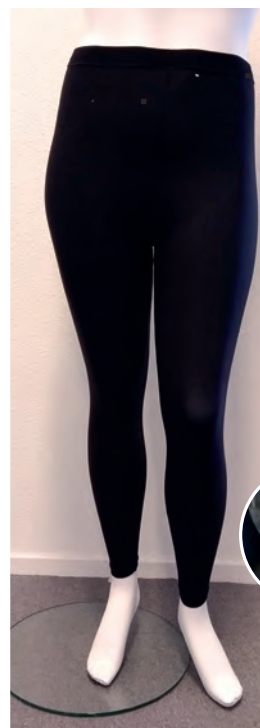

Opties

Rompverlenging	15742504
Buikversteving diagonaal	15742512
Siliconenband 3 of 5 cm	15742873
Elastische band 5 cm	15742873
Voetstuk met open tenen	15742563
Voetstuk met gesloten tenen	15742598
Sluiting	15742865
Rits	
Haken en ogen	
Rits met haken en ogen	
Gesloten kruis	15742547
(open kruis is standaard)	

Z-index

Vul het maatformulier in om een Cicatrex broek te bestellen.
Zijn de maatformulieren op? Laat het ons weten, of kijk op
thuasne.nl, onder downloads.


CICATREX Maatwerk



Vul het maatformulier in om een Cicatrex maatwerkartikel te bestellen. Zijn de maatformulieren op? Laat het ons weten, of kijk op thuasne.nl onder downloads.


ROMP

Rompdeel	Met armaanzet	15742148
	Zonder armaanzet	15742121
Materialen	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	
	Skin woven	
Opties	Rits	
	Haken en ogen	
	Rits met haken & ogen	
	Arm C-G (alleen bij vest met armaanzet)	15742334
	Buikversteving	15742342
	Cup met compressie	15742350
	Kraag met 1 sluiting	15742369
	Prothesehoes	15648257
	Prothesehoes Silon-tex	-

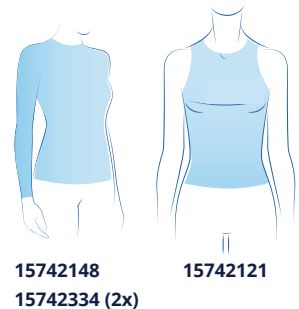

HAND

Modellen	Handschoen met duim zonder vingers tot	15742393
	Handschoen met vingers tot max E	15742407
Materialen	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	
	Skin woven	
Opties	Verlenging E-G / E-F	15742458
	Schouderkap met BH-bevestiging	15742431
	Schouderkap met gordel	15742431
	Vingerspreider	15742466

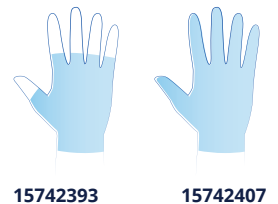


VINGER

Modellen	Vingerling	15742385
Materialen	Nature knitted	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	



ARM

Modellen	Armrous C-E, C-D	15742415
	Armrous C-F, C-G	15742415 +
Materialen	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver Knitted	
	Skin woven	
Opties	Schouderkap met BH-bevestiging	15742431
	Schouderkap met gordel	15742431
	Vingerspreider	15742466

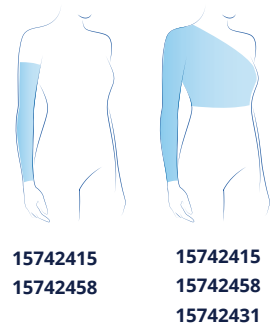

HOOFD

Modellen	Bivakmuts	15742067
	Bivakmuts met open gezicht	15742059
	Hoofd-/Halsband	15742040
	Kinbandage	15742032
Materialen	Nature woven	
	Skin woven	
	Neus- of oorbedekking	15742075



1574267

BEEN / VOET

Modellen	Kous B-D, E-G	15742717
	Kous A-B1	15742687
	Kous A-D met open teen	15742695
	Kous A-G, A-F met open teen	15742709
	Kous B-G	15742725
	Voetkap met open teen	15742679
Materialen	Nature knitted / woven	
	Rigid knitted	
	Silver knitted	
	Skin woven	
Opties	Gesloten teen	15742776
	Heupbevestiging	15742733



15742709

15742776



15742717



15742695

15742776




15742679

15742776

ALGEMENE

Opties	Siliconenboord 3 cm of 5 cm aan arm/been	15742873
	Elastische band 3 cm of 5 cm aan arm/been	15742873
	Sluiting haken & ogen	15742865
	Sluiting klittenband	15742865
	Sluiting rits	15742865
	Sluiting rits met haken & ogen	15742865
	Drukpelotte ingenaaid > 500 cm ²	15744221
	Drukpelotte ingenaaid - 250 - 500 cm ²	15744183
	Drukpelotte ingenaaid - 100 - 249 cm ²	15744175
	Drukpelotte ingenaaid - 10 - 99 cm ²	15744116
	Drukpelotte ingenaaid tot 9 cm ²	15743756
	Memoryschuim ingenaaid	-
	Polstering opgenaaid	-
	Silon-tex ingenaaid > 500 m ²	15744221
	Silon-tex ingenaaid - 250 - 500 cm ²	15744183
	Silon-tex ingenaaid - 100 - 249 cm ²	15744175
	Silon-tex ingenaaid - 10 - 99	15744116
	Silon-tex ingenaaid tot 9 cm ²	15743756
	Silon-tex met drukpelotte > 500 cm ²	15744264
	Silon-tex met drukpelotte 250 - 500 cm ²	15744213
	Silon-tex met drukpelotte 100 - 249 cm ²	15744159
	Silon-tex met drukpelotte 10 - 99 cm ²	15744132
	Silon-tex met drukpelotte tot 9 cm ²	15743764
	Voering ingenaaid	-
	Voering kunstleer opgenaaid	-

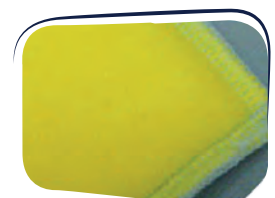

Mammacare

Cara

- Compressie BH na reconstructie of borst-besparende operatie.
- Voorgevormd, dubbellaagse cups voor gelijkmatige compressie zonder drukpunten.
- Brede banden, verstelbaar in 3 standen.
- Voorsluiting en ritssluiting met zachte voering.
- Brede stretchband onder de buste, voorkomt insnijding en omhoog kruipen.

Maten/Cup EUR

75 – 105 AA/A (34 – 46 AA/A)

70 – 105 B/C (32 – 46 B/C)

70 – 100 D/E (32 – 44 D/E)

105 D/E** (46 D/E)

110 – 120 AA/A**, B/C** (48 – 52 AA/A, B/C)

Voor artikelnummers: zie achterzijde.

Indicaties

Na een reconstructieve borstoperatie.

Volgend segmentale of kwadrantresectie.

Materiaal

54% polyamide, 33% katoen, 13% elastane

Kleuren

Champagne, zwart



Artikelnummers Mammacare Cara

Artikelnummer	Omschrijving	Artikelnummer	Omschrijving
T572301100AAA00	BH Cara maat 100-AAA, champagne	T5723010800BC60	BH Cara maat 80-BC, zwart
T572301100AAA60	BH Cara maat 100-AAA, zwart	T5723010800DE00	BH Cara maat 80-DE, champagne
T5723011000BC00	BH Cara maat 100-BC, champagne	T5723010800DE60	BH Cara maat 80-DE, zwart
T5723011000BC60	BH Cara maat 100-BC, zwart	T572301085AAA00	BH Cara maat 85-AAA, champagne
T5723011000DE00	BH Cara maat 100-DE, champagne	T572301085AAA60	BH Cara maat 85-AAA, zwart
T5723011000DE60	BH Cara maat 100-DE, zwart	T5723010850BC00	BH Cara maat 85-BC, champagne
T572301105AAA00	BH Cara maat 105-AAA, champagne	T5723010850BC60	BH Cara maat 85-BC, zwart
T572301105AAA60	BH Cara maat 105-AAA, zwart	T5723010850DE00	BH Cara maat 85-DE, champagne
T5723011050BC00	BH Cara maat 105-BC, champagne	T5723010850DE60	BH Cara maat 85-DE, zwart
T5723011050BC60	BH Cara maat 105-BC, zwart	T572301090AAA00	BH Cara maat 90-AAA, champagne
T5723011050DE60	BH Cara maat 105-DE, zwart	T572301090AAA60	BH Cara maat 90-AAA, zwart
T572301110AAA60	BH Cara maat 110-AAA, zwart	T5723010900BC00	BH Cara maat 90-BC, champagne
T5723011100BC60	BH Cara maat 110-BC, zwart	T5723010900BC60	BH Cara maat 90-BC, zwart
T572301115AAA60	BH Cara maat 115-AAA, zwart	T5723010900DE00	BH Cara maat 90-DE, champagne
T5723011150BC60	BH Cara maat 115-BC, zwart	T5723010900DE60	BH Cara maat 90-DE, zwart
T572301120AAA60	BH Cara maat 120-AAA, zwart	T572301095AAA00	BH Cara maat 95-AAA, champagne
T5723011200BC60	BH Cara maat 120-BC, zwart	T572301095AAA60	BH Cara maat 95-AAA, zwart
T5723010700BC00	BH Cara maat 70-BC, champagne	T5723010950BC00	BH Cara maat 95-BC, champagne
T5723010700BC60	BH Cara maat 70-BC, zwart	T5723010950BC60	BH Cara maat 95-BC, zwart
T5723010700DE00	BH Cara maat 70-DE, champagne	T5723010950DE00	BH Cara maat 95-DE, champagne
T5723010700DE60	BH Cara maat 70-DE, zwart	T5723010950DE60	BH Cara maat 95-DE, zwart
T572301075AAA00	BH Cara maat 75-AAA, champagne		
T572301075AAA60	BH Cara maat 75-AAA, zwart		
T5723010750BC00	BH Cara maat 75-BC, champagne		
T5723010750BC60	BH Cara maat 75-BC, zwart		
T5723010750DE00	BH Cara maat 75-DE, champagne		
T5723010750DE60	BH Cara maat 75-DE, zwart		
T572301080AAA00	BH Cara maat 80-AAA, champagne		
T572301080AAA60	BH Cara maat 80-AAA, zwart		
T5723010800BC00	BH Cara maat 80-BC, champagne		



COMPRESSIEKOUSSEN

VENOFLEX DAMES



Medische compressiekousen voor de retail
Deze kousen vallen binnen klasse 1 en zijn verkrijgbaar in de apotheek,
winkel of online.

Kokoon

Modellen	Kous AD Panty AT Zwangerschapspanty AT
Werking	Medische compressiekous met een verantwoorde drukopbouw.
Overig	Antibacterieel materiaal. Verstevigde hiel en voetboog. Machinewas mogelijk.



Simply Coton Fin

Modellen	Kous AD
Werking	Katoenen kousen, zacht en hoog draagcomfort
Overig	Gewezen teenstuk. Schuine brede boord, vermindert kans op tourniquet effect. Geen versteviging in de voet. Gewezen met een fijn ribpatroon voor mooie uitstraling. Machinewas mogelijk.



Fast Laine

Modellen	Kous AD
Werking	Vocht & temperatuur regulerend
Overig	39% Merino wool. Isolator en thermoregulator. Ademend en anti-bacterieel. Extreem zacht op de huid en jeukt niet. Hoge flexibiliteit. Machinewas mogelijk.




MAATTABEL

DAMES - Schoenmaat 36-32

KORT $\ell D < 37$ cm
NORMAAL $37 \text{ cm} < \ell D < 40$ cm
LANG $\ell D > 40$ cm

	cB	cC -	cC	cC +
0 16 - 19 cm	21 - 28 cm	28 - 33 cm	33 - 42 cm	
1 19 - 21 cm	23 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 46 cm	
2 21 - 24 cm	26 - 32 cm	32 - 38 cm	38 - 48 cm	
3 24 - 26 cm	29 - 34 cm	34 - 42 cm	42 - 52 cm	
4 26 - 29 cm	32 - 37 cm	37 - 46 cm	46 - 54 cm	
5 29 - 31 cm	36 - 43 cm	43 - 49 cm	49 - 56 cm	

KNIEKOUSSEN

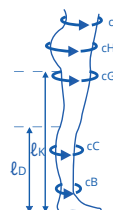

ℓD : lengte vloer tot kruis
cB: kleinste omvang enkel
cC: grootste omvang kuit
cG: grootste omvang dijbeen
cH: grootste omvang heup
cT: kleinste omvang taille

KORT $\ell K < 68$ cm
NORMAAL $68 \text{ cm} < \ell K < 74$ cm
LANG $\ell K > 74$ cm

	cB	cG	cT maxi	cH maxi
0 16 - 19 cm	42 - 52 cm	90 cm	120 cm	
1 19 - 21 cm	45 - 54 cm	93 cm	128 cm	
2 21 - 24 cm	50 - 59 cm	96 cm	133 cm	
3 24 - 26 cm	56 - 66 cm	104 cm	145 cm	
4 26 - 29 cm	58 - 69 cm	110 cm	154 cm	
5 29 - 31 cm	63 - 74 cm	113 cm	162 cm	

PANTY



KORT $\ell K < 68$ cm
NORMAAL $68 \text{ cm} < \ell K < 74$ cm
LANG $\ell K > 74$ cm

	cB	cG	cT maxi	cH maxi
0 16 - 19 cm	42 - 52 cm	105 cm	136 cm	
1 19 - 21 cm	45 - 54 cm	105 cm	136 cm	
2 21 - 24 cm	50 - 59 cm	115 cm	145 cm	
3 24 - 26 cm	56 - 66 cm	125 cm	158 cm	
4 26 - 29 cm	58 - 69 cm	130 cm	167 cm	
5 29 - 31 cm	63 - 74 cm	135 cm	176 cm	

PANTY
ZWANGERSCHAP



INDICATIES

Vermoeide benen aan het einde van de dag, zware benen, vochtophoping in de benen.



COMPRESSIEKOUSEN

VENOFLEX HEREN

Medische compressiekenousen voor de retail
Deze kousen vallen binnen klasse 1 en zijn verkrijgbaar in de apotheek,
winkel of online.

Fast Coton

Modellen	Kous AD
Werking	Medische compressiekous met een verantwoorde drukopbouw
Overig	36% Egyptisch katoen Stevige kousen Zacht op de huid Machinewas mogelijk



City Comfort Coton

Modellen	Kous AD
Werking	Hoge afwerking voor meer draagcomfort.
Overig	Schuine brede boord, vermindert kans op tourniquet effect. Geweven met een fijn ribpatroon voor mooie uitstraling. Machinewas mogelijk.



Fast Laine

Modellen	Kous AD
Werking	Vocht en temperatuur regulerend.
Overig	39% Merino wool. Isolator en thermoregulator. Ademend en ant-bacterieel. Extreem zacht op de huid en jeukt niet. Hoge flexibiliteit. Machinewas mogelijk.



MAATTABEL


HEREN - Schoenmaat 38-46

	NORMAAL $\ell D < 44$ cm LANG $\ell D > 44$ cm			
	cB	cC -	cC	cC +
1	19 - 21 cm	23 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 46 cm
2	21 - 24 cm	26 - 32 cm	32 - 38 cm	38 - 48 cm
3	24 - 26 cm	29 - 34 cm	34 - 42 cm	42 - 52 cm
4	26 - 29 cm	32 - 37 cm	37 - 46 cm	46 - 54 cm
5	29 - 31 cm	36 - 43 cm	43 - 49 cm	49 - 56 cm

SOCKS



ℓD : lengte vloer tot onderzijde knie
 ℓK : lengte vloer tot kruis
cB: kleinste omvang enkel
cC: grootste omvang kuit
cG: grootste omvang dijbeen

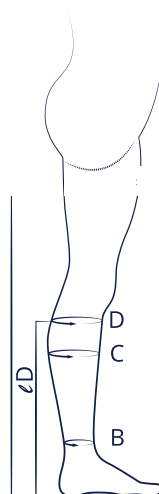

INDICATIES

Vermoeide benen aan het
einde van de dag, zware benen,
vochtophoping in de benen.

ZWACHTELINSTRUCTIE MOBIDERM

Mobiderm zwachtels zijn toepasbaar voor benen en armen.

Benodigheden:

- Katoenen rekwachtel
- Mobiderm-zwachtel
- Biflexideal-zwachtel korte rek
- Biflex Practic (16+ of 17+) mediumrek ($\pm 150\%$)

Stap 1:

Zwachtel het katoenen verband met matige druk om het lichaamsdeel. Zwachtel met 2 cm overlap. Controleer na afloop de mobiliteit.



Stap 2:

Zwachtel het Mobiderm verband om het been/arm met een overlap van 1 blokje. Leg bij de knie/elleboog het Mobiderm-verband aan in een kruis of een halve overlap. Controleer na afloop de mobiliteit.



Stap 3:

Zwachtel het Biflexideal onder lichte druk. Strijk het verband na. Controleer na afloop de mobiliteit.



Stap 4:

Bij een korte-rekverband zwachtel je nogmaals met de Biflexideal.

Dagverband

Bij een lange-rekverband, zwachtel Biflex 16+ of 17+ of gebruik de medium-rekwachtel Biflex 16+ of 17+ practic. Leg de lus van het Biflex om de hand of de voet en maak een keuze op welke overlap-lijn gezwachteld gaat worden. Leg bij elke volgende laag de rand van de volgende laag op de overlap-lijn en zwachtel met een druk, totdat het rechthoek zich tot een vierkant vormt. Controleer na afloop de mobiliteit.



ZWACHTELINSTRUCTIE KIT BIFLEX (ulcus cruris)

Voordat je begint: kies de juiste maat meet hiervoor de omvang van de enkel.



Maat 1: <25 cm

Maat 2: 25-30 cm

Maat 3: > 30 cm

Stap 1:

Zwachtel de witte bandage met lichte rek over de voet, bedek de hiel volledig en bevestig de hiel. Wij adviseren eerst de bovenzijde en dan de onderzijde te bevestigen (meest effectief).



Stap 2:

Zwachtel het onderbeen en rek daarbij elke rechthoek uit tot een vierkant. Zwachtel elke laag met een halve overlapping (de overlap-lijn). Stop met zwachtelen tot 2 vingers onder de knie. Overtollige zwachtel kan worden afgeknipt. Bevestig de zwachtel met de meegeleverde klittenbanden.



Stap 3:

Zwachtel de beige bandage met lichte rek om de voet en bedek de hiel volledig. Bevestig deze slag eerst aan de bovenzijde en dan aan de onderzijde (meest effectief).



Stap 4:

Zwachtel het onderbeen en rek daarbij elke rechthoek uit tot tot een vierkant. Zwachtel elke laag met een halve overlapping (de overlap-lijn). Stop met zwachtelen 2 vingers onder de knie. Overtollige zwachtel kan worden afgeknipt. Bevestig de zwachtel met de klittenbanden.



COMPULCE ONDERZOEK

Beoordeling van de klinische werkzaamheid en veiligheid van
het tweelaagse compressiesysteem KITBIFLEX
vergeleken met
het vierlaagse compressiesysteem PROFORE®
bij de behandeling van ulcus cruris (stadium C6).

Fase IIIb, multicenter, gerandomiseerd, open-label, nationaal klinisch onderzoek in 2 parallele groepen.

Primair doel

De **non-inferioriteit** van het tweelaagse compressiesysteem KIT**BIFLEX** aantonen, in vergelijking met het vierlaagse compressiesysteem **PROFORE®**. Bij de behandeling van ulcus cruris (stadium C6) in termen van volledige genezing na 16 weken.

Primaire uitkomstmaat

Percentage patiënten met **volledige genezing** (100% epithelialisatie en afwezigheid van exsudaat) **na 16 weken**, volgens het oordeel van de onderzoeker.

Beschrijving populatie



Gemiddelde leeftijd: **74 jaar**
68% vrouwen
Gemiddelde BMI: **28,9**
Duur ulcus: **gemiddeld 8 maanden**
58% recidiverende ulcera

92 patiënten toegelaten (veiligheidspopulatie)
KIT**BIFLEX**: n=49 / **Profore®**: n=43


88 patiënten hebben het compressiesysteem ten minste eenmaal gedragen en met ten minste een primaire uitkomstmaat (Full Analysis Set-populatie)
KIT**BIFLEX**: n=47 / **Profore®**: n=41

83 patiënten zonder een belangrijke protocol-afwijking (per Protocol-populatie)
KIT**BIFLEX**: n=45 / **Profore®**: n=38

RESULTATEN

AANGETOONDE SUPERIORITEIT VAN KITBIFLEX

* Benedengrens van het 90% betrouwbaarheidsinterval strikt groter dan 0.

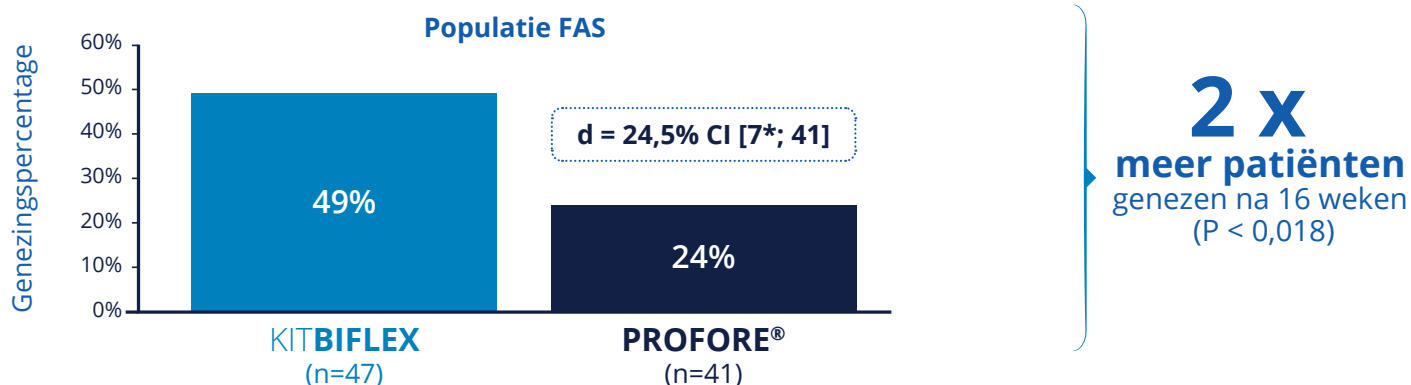

BEHANDELINGSKOSTEN ONDER CONTROLE



TEVREDEN PATIËNTEN & ZORGVERLENERS



94,6 vindt KITBIFLEX comfortabel

Zachtheid: 100% is tevreden of zeer tevreden

94,6% vindt de druk draaglijk

Ademend vermogen/warmte: 97,3% is tevreden of zeer tevreden

Algeheel tevredenheidspercentage voor **patiënten:**

97,6 %



Aanleggemak 100% is tevreden of zeer tevreden

Duur van het aanleggen: 100% is tevreden of zeer tevreden

97,8 vindt KITBIFLEX praktisch

86,7% vindt dat KITBIFLEX goed blijft zitten op het been

Algeheel tevredenheidspercentage voor **zorgverleners:**

97,8 %


MOBIDERM:

Bewezen effectief compressiesysteem

EIGENSCHAPPEN

Mobiderm is een medisch hulpmiddel voor behandeling van lymfoedeem. Het wordt ingezet als nachtbehandeling tijdens de onderhoudsfase.

Mobiderm zorgt voor drukverschillen op de huid door de specifiek ontworpen blokkenstructuur. Hierdoor wordt de drainage van lymfevocht geoptimaliseerd. In meerdere Europese studies is het effect van dit compressiesysteem onderzocht.

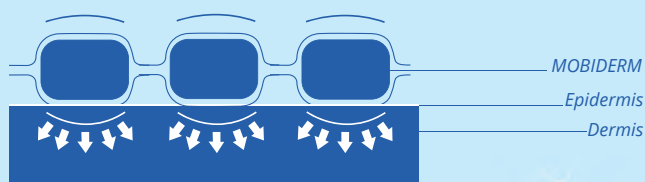


MOBIDERM IS VERKRIJGBAAR IN

- Verbandmiddel
 - Compressiesysteem
- Voor onderbeen, been en arm
In maatwerk en confectie



MARILYN-STUDIE ⁽¹⁾

In dit onderzoek is het effect van de Mobiderm nachtcompressie onderzocht tijdens de onderhoudsfase voor behandeling van lymfoedeem na borstkanker. Groep I startte met Mobiderm op dag 0 en groep II op dag 30 van de onderhoudsfase. Resultaten werden vergeleken op dag 30 en dag 90.

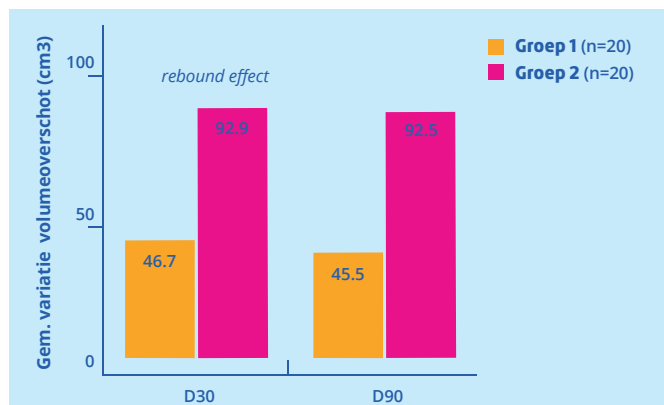

Gemiddelde toename lymfoedeemvolume ten opzichte van D0

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE

Mobiderm nachtcompressie beperkt het vroege rebound effect van het oedeem tijdens de onderhoudsfase bij lymfoedeem na borstkanker.

CLINICAL USE OF A NIGHT-TIME MOBIDERM GARMENT ⁽²⁾

In dit onderzoek is het lange-termijneffect (6 maanden) van Mobiderm nachtcompressie beoordeeld. Het effect is onderzocht bij 145 patiënten met lymfoedeem als gevolg van borstkanker.

Deze studie heeft de grootste populatie en de langste onderzoeksperiode binnen studies naar compressiehulpmiddelen gedurende de nacht. De primaire uitkomstmaat is het verschil in omtrek tussen aangedane en gezonde arm.



Omvangsverschil armen na start Mobiderm (n=145)

BELANGRIJKSTE CONCLUSIE

Mobiderm nachtcompressie vermindert significant het volume in de arm bij lymfoedeem als gevolg van borstkanker (- 6,6% na 6 maanden).

- (1) Clinical Study to Assess Safety and Efficacy of a New Armsleeve in the Management of Arm Lymphoedema (MARILYN)
- (2) Clinical use of a Night-Time MOBIDERM Garment as a Treatment Modality for Breast Cancer-Related Lymphedema: A Retrospective Longitudinal Cohort Study

MEER WETEN?

T: 033 247 44 44
E: INFO@THUASNE.NL

Thuasne Compressievesten

Consumentenonderzoek

We hechten grote waarde aan de feedback van de eindgebruikers van onze producten. Daarom hebben we in samenwerking met Declacare een onderzoek gedaan onder de gebruikers van Thuasne compressievesten. In deze whitepaper vind je een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek.

Doel

Het primaire doel van dit onderzoek was om de therapietrouwheid van eindgebruikers en de ervaring met het hulpmiddel in kaart te brengen.

Opzet

De eindgebruikers hebben een vragenlijst ingevuld, met o.a. vragen over de aanleiding voor het starten met het compressievest. De draagtijd in maanden, dagen per week en uren per dag en de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. De vragenlijsten zijn per post verzonden naar 198 mensen die in het verleden een compressievest van Thuasne aangemeten hebben gekregen.

Resultaten

De respons op onze vragenlijst is met 45% hoog te noemen, in vergelijking met de gemiddelde respons op vragenlijsten. Dat geeft aan dat deze groep gemotiveerd is om de behandeling te evalueren.

Aanleiding voor het compressievest

Voor 98% van de respondenten is oedeem, oftewel vochtophoping, in de romp de belangrijkste reden geweest voor het starten met een compressievest. Een tweede duidelijke aanleiding is pijn, aangegeven door 47% van de respondenten.

Draagtijd en gebruik van het compressievest

77% draagt het compressievest langer dan negen maanden. 67% geeft aan het vest nog steeds nodig te hebben. Het vest wordt intensief gedragen. 62% geeft aan het vest zes tot zeven dagen per week te dragen en 75% draagt het vest gedurende zeven of meer uur per dag.

Toegevoegde waarde

Met behulp van een VAS-score (schaal 0-10) is gemeten wat de bijdrage van het vest is op het verminderen van pijn. En in hoeverre dit een toegevoegde waarde heeft op het uitvoeren van fysieke activiteiten. 53% vindt dat het compressievest hun pijn sterk verminderd heeft (score >7), tegenover 10% die aangeeft dat het vest geen tot nauwelijks heeft bijgedragen in pijnverlichting (score <3).

41% van de respondenten vindt dat het compressievest een aanzienlijke bijdrage biedt in het uitvoeren van hun dagelijkse fysieke activiteiten (score >7). 13% van de respondenten geeft aan niet tot nauwelijks verbetering in fysieke activiteit te ervaren door het compressievest (score <3).


Beoordeling

Het compressievest krijgt een gemiddeld cijfer van **7,5** (schaal van 1-10). In de toelichting viel op dat de afname van oedeem aanzienlijk wordt ervaren. Men geeft aan dat ze sterk afhankelijk zijn van het compressievest. Bij de respondenten die het vest met een onvoldoende beoordelen komt vooral naar voren dat ze de druk van het vest niet kunnen verdragen.

Conclusie

Op basis van de respons concluderen we, dat de groep "vestgebruikers" van Thuasne erg betrokken is bij de behandeling. Oedeem en pijn zijn hoofdredenen om een Thuasne compressievest op te starten. Het vest is niet een tijdelijk hulpmiddel, zo blijkt uit de respons, maar wordt veelal chronisch gedragen. Daarnaast wordt het vest ook intensief gedragen, zowel in het aantal dagen per week, als in het aantal uren per dag. Er is een hoge tevredenheid over de toegevoegde waarde van het vest op het verminderen van pijn en verbeteren van fysieke activiteit.

Heeft deze whitepaper jouw interesse gewekt en wil je er meer van weten? Mail ons: info@thuasne.nl

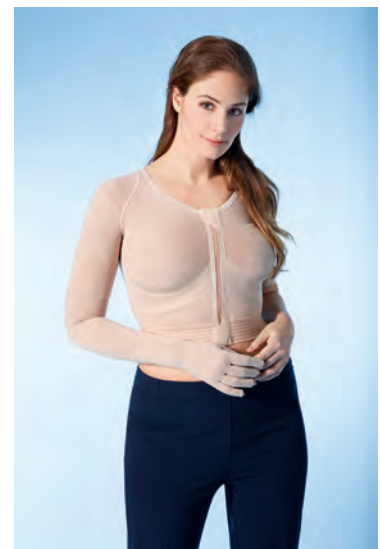


Pijnverlichting



- Sterke verlichting van pijn (Score >7)
- Verlichting van pijn (score 3-7)
- Weinig verlichting van pijn (score <3)

Verbetering van fysieke activiteiten

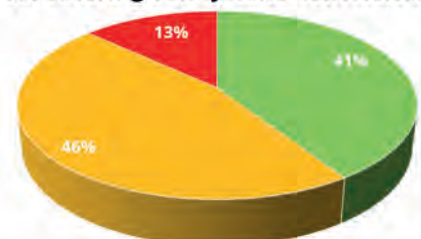

- Grote verbetering van fysieke activiteiten (Score >7)
- Verbetering in fysieke activiteiten (Score 3-7)
- Weinig verbetering van fysieke activiteiten (Score <3)

Thuasne Compressievesten

de toegevoegde waarde

Wij hechten grote waarde aan onderbouwing van onze producten. Daarom hebben we met ons Lymphatrex compressievest geparticipeerd in een pilot studie van het UMC Utrecht. Deze is in 2019 afgerond en gepubliceerd in "Lymphatic Research and Biology". In deze whitepage een samenvatting van de uitkomsten van deze pilot studie.

Doel

Het primaire doel van deze pilot studie was het onderzoeken van de toegevoegde waarde van een compressievest binnen de behandeling van lymfoedeem, ontstaan na borstkanker. De primaire uitkomstmaten zijn gerapporteerde oedeem- en pijn afname.

Methode

Patiënten met ontwikkeling van lymfoedeem, als gevolg van de behandeling van borstkanker, zijn geïnccludeerd, wanneer er een symptomatisch oedeem was. Dat wil zeggen een borstoedeem met een pijnscore >3, op een 10 puntsschaal. Deze groep kreeg een compressievest aangemeten. Het vest werd minimaal 4 dagen per week gedragen gedurende 6 uur per dag. Met behulp van een gerichte vragenlijsten werden de resultaten verkregen.

Resultaten

Onderzoeksgroep



- 24 patiënten geïnccludeerd
- Resultaten zijn gemeten op basis van vragenlijsten over:
 - A - oedeem
 - B - pijn

Oedeem (A)

- ✓ 92% rapporteerde oedeem op baseline
- ✓ 6 patiënten rapporteerde ernstige zwelling op baseline
- ✓ Na 6 maanden rapporteerden 2 patiënten nog ernstige zwelling

Pijn (B)

- ✓ 23 patiënten rapporteerden pijn op baseline
- ✓ 6 patiënten rapporteerden ernstige pijn op baseline
- ✓ Na 3 maanden rapporteerden drie patiënten nog matig tot ernstige pijn

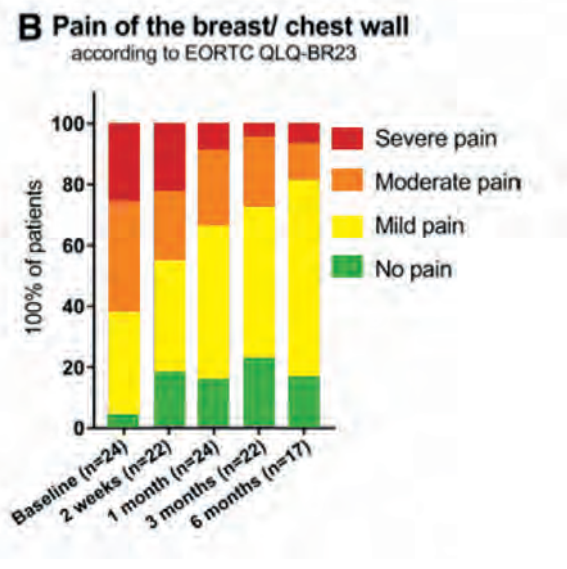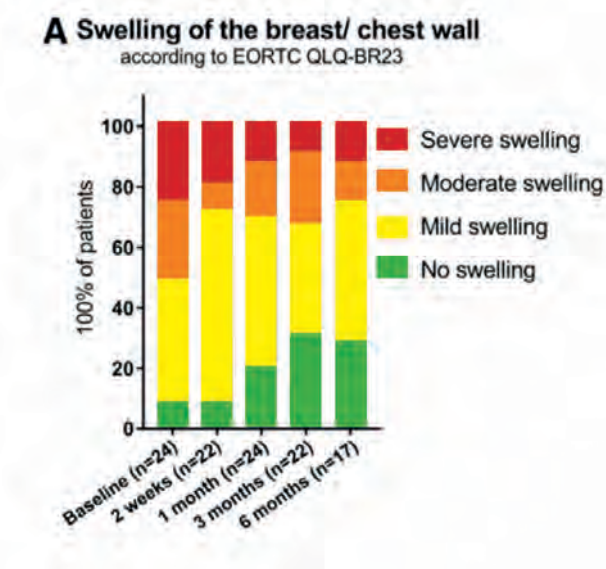

Conclusie & discussie

Ondanks de geringe onderzoeksgroep (n=24), kan geconcludeerd worden dat het Thuasne compressievest mogelijk een acceptabele oplossing is voor afname van zwelling en pijnbeleving. Er is een aantoonbare vermindering zichtbaar in het gerapporteerde oedeem en pijn na behandeling met een compressievest. De grootste afname van oedeem en pijn is zichtbaar na 3 maanden dragen van het compressievest.

Heeft deze whitepage jouw interesse gewekt en wil je er meer van weten?

Mail ons: info@thuasne.nl